
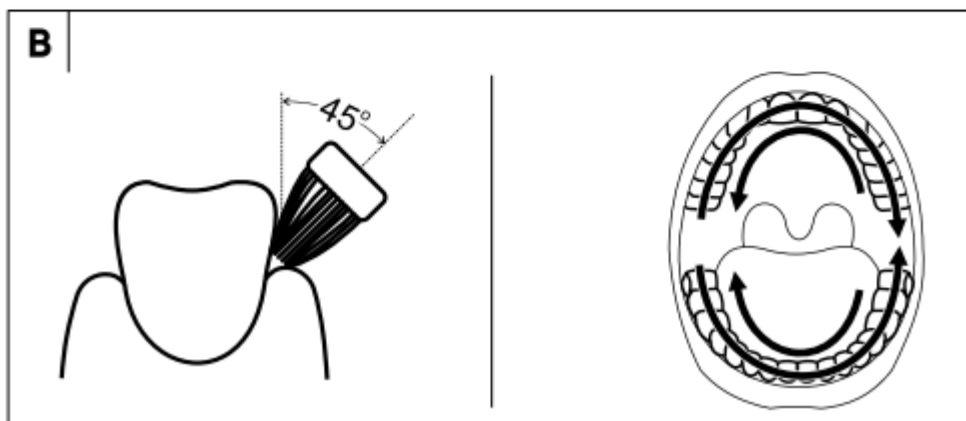


PERIUȚĂ ELECTRICĂ SONICĂ SENCOR

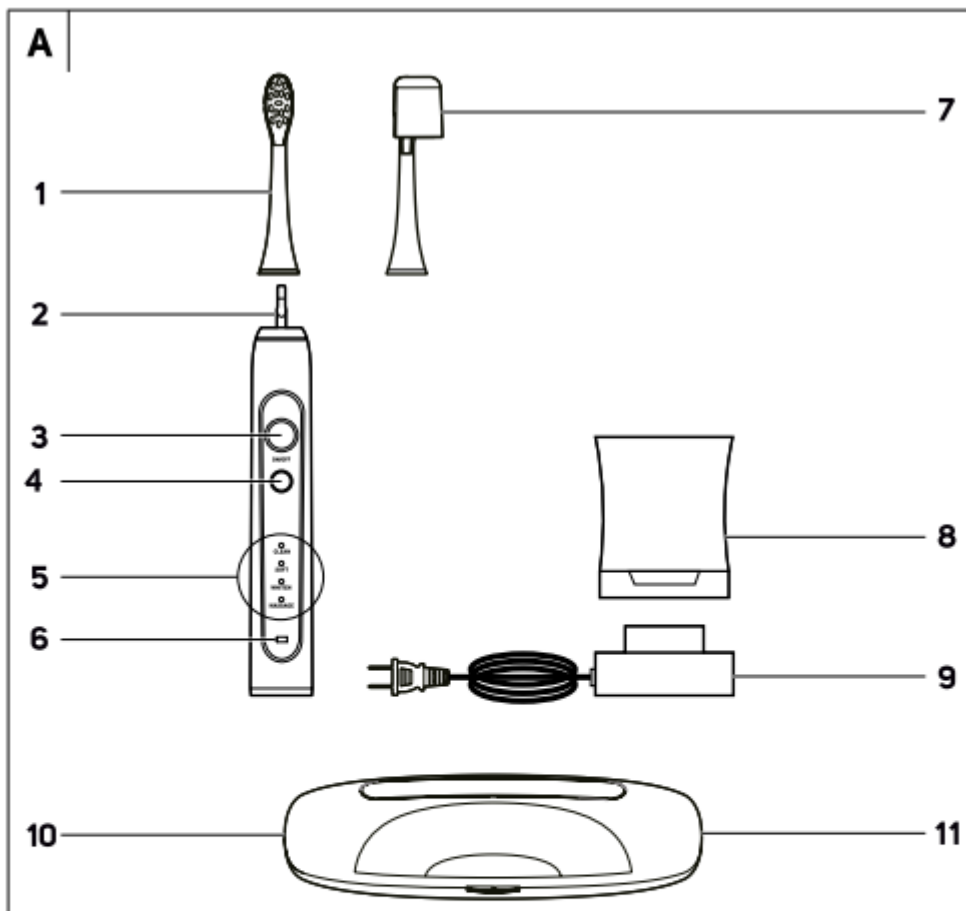

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

AVERTISMENTE GENERALE

- Periuțele de dinți pot fi folosite de copii și de persoane cu capacități fizice sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, **doar** dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți să folosească aparatul într-un mod sigur și să înțeleagă potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea efectuată de utilizator, nu trebuie efectuată de către copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un service autorizat pentru a preveni situațiile periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă are cablul de alimentare deteriorat.

- Părțile aparatului care trebuie să fie montate sau să stea în poziție verticală, trebuie să fie montate sau să stea în poziție verticală în așa fel încât să nu poată cădea în apă.
- Utilizați baza de încărcare originală furnizată pentru a încărca periuța de dinți. Înainte de a conecta baza de încărcare la o priză, asigurați-vă că tensiunea de pe eticheta de identificare corespunde tensiunii din priza dumneavoastră.

Siguranța electrică

- Înainte de a conecta baza de încărcare la o priză electrică, asigurați-vă că tensiunea menționată pe eticheta acesteia corespunde cu tensiunea de pe priza dumneavoastră.
- Conectați aparatul doar la o priză împământată corect. Nu utilizați un prelungitor.
- Nu conectați și deconectați cablul de alimentare al bazei de încărcare la și de la priza de alimentare cu mâinile ude.
- Asigurați-vă că contactele ștecherului de alimentare nu intră în contact cu apa sau orice alte lichide. Dacă se întâmplă acest lucru, lăsați ștecherul să se usuce înainte de a-l utiliza din nou.
- Nu deconectați baza de încărcare de la priză trăgând de ștecher. Acest lucru ar putea deteriora cablul sau priza. Prindeți și trageți de ștecher pentru a deconecta aparatul de la priză.
- Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atâră pe marginea mesei și că nu atinge suprafețe fierbinți sau obiecte ascuțite.
- Păstrați cablul de alimentare uscat.
- Dacă cablul de alimentare, cablul USB sau adaptorul USB este deteriorat, trebuie înlocuit de către producătorul tehnician service autorizat sau de o persoană calificată, pentru a preveni situațiile periculoase. Este interzisă utilizarea cablului de alimentare, cablului USB sau adaptorului USB.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul bazei de încărcare.
- Aparatul este echipat cu o baterie încorporată cu durată lungă de viață, care poate fi îndepărtată doar la un centru service profesionist. Nu încercați niciodată să îl scoateți singur din aparat.

Atenție:

Nu dezasamblați niciodată aparatul în scopul demontării bateriei. Nu scurtcircuitați niciodată aparatul și nu îl aruncați în foc. Utilizarea incorectă, riscă eliberarea de substanțe toxice care provoacă incendiu sau explozie.

- Nu reparați singur aparatul și nu faceți nicio ajustare la acesta. Solicitați toate reparațiile sau ajustările aparatului la un service autorizat. Modificarea aparatului în timpul perioadei de garanție poate anula garanția.
- Pentru a preveni riscul de accidentare prin electrocutare, nu introduceți niciodată baza de încărcare și cablul de alimentare al acesteia, cablul USB de încărcare și adaptorul USB în apă sau alte lichide, și nici nu spălați aceste părți sub jet de apă.
- Dacă baza de încărcare cade în apă, în niciun caz nu o mai folosiți, ce contactați un service autorizat pentru inspecție.

SIGURANȚA ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

- Această periuță de dinți servește la curățarea dinților și gingiilor. Nu o utilizați în scopuri comerciale sau în alte scopuri decât cele pentru care este destinată.
- Nu expuneți periuța de dinți sau accesoriile sale la efectele mediului exterior, temperaturilor extreme, razelor directe ale soarelui și nu o amplasați în apropierea unor flăcări deschise, a elementelor de încălzire și a altor echipamente sau aparate care ar putea fi surse potențiale de căldură.
- Poziționați întotdeauna paharul de depozitare cu baza de încărcare pe o suprafață plană și stabilă.

- Protejați carcasa de transport împotriva pătrunderii apei. Nu o puneți în apropierea vaselor pline cu apă, de ex. chiuvetă, cadă, etc., nu o stropiți cu apă, nu o introduceți în apă și nici nu o spălați sub jet de apă.
- Păstrați ștecherul cablului de alimentare al bazei de încărcat uscat.
- Încărcați, folosiți și păstrați periuța de dinți la temperatura camerei.
- Din motive de igienă, capetele de periură de dinți ar trebui folosite doar de un singur utilizator. Înlocuiți în mod regulat capul periurii de dinți la fiecare 3 luni sau mai devreme dacă prezintă semne de uzură. Utilizați doar capete de periură de dinți de schimb originale.
- Când periura de dinți este folosită de copii, supravegheați-i în timp ce se spală pe dinți până când dobândesc tehnica adecvată de periaj de dinți.
- În cazul în care au fost efectuate intervenții dentare sau intervenții chirurgicale bucale în ultimele două luni, consultați utilizarea unei periurii de dinți socine cu medicul dentist.
- În cazul în care sângerarea gingiei apare atunci când este folosită periura de dinți și dacă sângerarea nu se oprește nici după o săptămână de la folosire, contactați medicul dentist.
- Dacă pasta de dinți conține peroxid, bicarbonat de sodiu sau alt bicarbonat (folosit frecvent în pastele de dinți pentru albire), atunci curăța bine peria și mânerul după utilizare.
- În cazul în care folosirea periurii provoacă senzații plăcute sau dureroase, nu mai folosiți periura și consultați această situație cu medicul dentist.
- În cazul în care aveți un stimulator cardiac sau un alt dispozitiv implantat, consultați utilizarea periurii de dinți cu medicul dumneavoastră sau producătorul implantului.
- Efectuați curățarea și întreținerea conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere". Nu spălați periura de dinți sau accesoriile acesteia în mașina de spălat vase.
- Nu faceți nicio modificare la periura de dinți sau la accesoriile acesteia. Modificând produsul, riscați să anulați opțiunile legale ca urmare a performanței nesatisfăcătoare sau a garanției de calitate.

DESCRIEREA APARATULUI

A1 Cap periură de dinți cu inel colorat

A2 Pin de conectare

A3 Întrerupător principal

A4 Comutator mod

A5 Indicatori LED mod:

CLEAN – mod standard de curățare

SOFT – mod de curățare delicat pentru gingiile sensibile

ALBIRE – mod de albire

MASAJ – mod de masaj al gingiilor

A6 Indicator baterie

A7 Capac igienic

A8 Pahar de depozitare – atunci când este pus pe baza de încărcare, servește la încărcarea periurii de dinți

A9 Bază de încărcare

A10 Slot micro-USB pentru cablu de încărcare USB

A11 Carcasă de transport cu filtru UV

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, clătiți capul periurii de dinți și paharul cu apă fierbinte curată.
- Ștergeți corpul periurii de dinți cu un material textil uscat sau foarte puțin umezit. NU introduceți niciodată baza de încărcare și cablul de alimentare în apă, și nici nu le spălați sub jetul de apă sau în mașina de spălat vase.

ÎNCĂRCARE UTILIZÂND BAZA DE ÎNCĂRCARE

- Această periuță de dinți este echipată cu un sistem de încărcare fără contact (inductiv), care funcționează pe principiul transferului de energie printr-un câmp electromagnetic. Este suficient să puneți periuța de dinți în paharul cu baza de încărcare și să conectați baza de încărcare la o sursă de energie electrică.
- Puneți paharul cu baza de încărcare pe o suprafață plană și stabilă și conectați cablul de alimentare la priză.
- Puneți periuța de dinți oprită în pahar. Încărcare va începe automat și indicatorul LED de pe periuța de dinți va lumina.
- Când bateria este încărcată complet, indicatorul LED se va stinge.

Atenție:

Nu puneți obiecte de metal în pahar împreună cu periuța de dinți. Acestea pot afecta procesul de încărcare și pot cauza supraîncălzirea bazei de încărcare.

Notă:

Când încărcați periuța de dinți pentru prima dată după achiziționare sau dacă nu a fost folosită mai mult de trei luni, este necesar să o încărcați 24 de ore. Periuța de poate încălzi în timpul procesului de încărcare. Acest lucru este normal și nu indică defecțiuni.

- Când procesul de încărcare este complet, vă recomandăm să deconectați baza de încărcare de la sursa de alimentare.
- Periuța de dinți este proiectată să funcționeze în mod regulat până la 3 săptămâni după ce a fost încărcată.
- Deși este posibil să reîncărcați periuța de dinți după ce aceasta este complet descărcată, pentru a menține durata de viață optimă a bateriei, vă recomandăm să o încărcați la intervale regulate (de exemplu, după 2-3 săptămâni de utilizare).

ÎNCĂRCARE UTILIZÂND CARCASA DE TRANSPORT

- Carcasa de transport protejează periuța de dinți și accesoriile împotriva pierderii, impactului, zgârieturilor și murdăriei atât în timpul călătoriilor cât și atunci când sunteți acasă. În plus, este echipată cu un slot micro USB, la care se poate conecta cablul USB furnizat și bateria periuței de dinți poate fi reîncărcată în acest mod dacă este necesar.
- Puneți periuța de dinți în carcasă.
- Conectați cablul microUSB la carcasă. Conectați celălalt capăt al cablului la un adaptor USB și apoi la o priză, sau conectați-l la un port USB al unui dispozitiv potrivit, cum ar fi PC, laptop etc. Încărcare va începe automat și indicatorul LED de pe corpul periuței de dinți va lumina.
- Când bateria este încărcată complet, indicatorul LED se va stinge. Deconectați cablul USB de la carcasa de transport și de la sursa de alimentare.

FUNCȚIONARE

- Glisați capul periuței de dinți pe pinul de conectare de pe corpul periuței de dinți. Între corpul periuței și inelul colorat de pe capul periuței de dinți trebuie să rămână un spațiu mic, care nu constituie un defect. Pentru a scoate capul periuței de dinți, procedați în ordine inversă.
- Udați periuța de dinți și aplicați o cantitate mică de pastă de dinți pe aceasta. Porniți periuța de dinți apăsând comutatorul principal.
- Utilizați comutatorul de mod pentru a selecta un mod de curățare:
 - CLEAN – mod pentru curățarea standard a dinților sănătoși
 - SOFT – modul blând pentru dinți sau ginii sensibile, vă recomandăm să utilizați acest mod atunci când dinții sunt mai sensibili, când baza dinților este expusă, parodontoză, implanturi și alți înlocuitori dentari
 - WHITEN – mod potrivit pentru albirea dinților
 - MASSAGE – modul puls pentru masarea delicată a gingiilorIndicatorul LED al modului selectat va fi aprins.

Notă:

Periuța de dinți își amintește ultimul mod utilizat și, prin urmare, nu este necesară reactivarea acestuia prin apăsarea butonului de comutare a modului.

Dacă apăsați butonul de comutare a modului în timp ce vă curățați dinții, periuța de dinți va trece în noul mod și lumina respectivă se va aprinde.

- Puneți perii periuței de dinți la un unghi de 45° în linie cu gingia, vezi figura B. Folosind mișcări scurte lente, mutați periuța la ceilalți dinți. Odată ce partea exterioară a arcadei dentare din dreapta sus este periată, mutați periuța de dinți în partea interioară a arcadei dentare. Din nou, procedați din spate în față. Reglați unghiul periuței de dinți la aranjamentul dinților. Când periați partea interioară a dinților frontali, țineți mânerul periuței de dinți vertical, astfel încât vârful capului periuței de dinți să fie orientat în sus. La final, periați suprafețele dentare superioare.
- În același mod, periați jumătatea dreaptă a arcadei dentare inferioare, jumătatea stângă a arcadei dentare inferioare și în final și jumătatea stângă a arcadei dentare superioare. Când periați partea interioară a dinților frontali ai arcadei dentare inferioare, țineți mânerul periuței de dinți vertical, astfel încât vârful capului periuței de dinți să fie orientat în jos.

Notă:

Temporizatorul cu oprire automată oprește automat periuța de dinți după 2 minute de funcționare. Acesta este timpul de periaj recomandat de stomatologi pentru periuța de dinți sonică.

- După ce ați terminat de utilizat, opriți periuța de dinți folosind butonul principal și curățați-o conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere". Apoi puneți-o în pahar sau în carcasă. Înainte de a o pune în carcasă, puneți capacul igienic și scoateți capul de pe mânerul periuței de dinți.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Avertisment:

Înainte de curățare, periuța de dinți trebuie să fie întotdeauna oprită, iar baza de încărcare trebuie deconectată de la sursa de energie electrică.

Pentru curățarea periuței de dinți, nu utilizați niciodată produse cu curățare cu efect abraziv, solvenți etc. În caz contrar, suprafața aparatului poate fi deteriorată.

În afară de paharul de depozitare, nicio parte a periuței de dinți nu este destinată spălării în mașina de spălat vase.

- Din motive de igienă, curățați regulat periuța de dinți după fiecare utilizare.
- Clătiți bine capul periuței de dinți sub jet de apă caldă pentru a îndepărta orice pastă de dinți sau alte resturi. Dacă la periajul dinților se folosește pastă pentru albire, se recomandă aplicarea unei picături de săpun pe capul periuței de dinți și apoi spălarea temeinică sub jet de apă caldă. Scoateți capul periuței de dinți din mâner cel puțin o dată pe săptămână și curățați-l sub jet de apă în locul în care este atașat de mâner.
- Clătiți mânerul periuței de dinți sub jet de apă caldă și apoi uscați-l.
- În mod regulat sau dacă este necesar, clătiți paharul de depozitare al periuței de dinți. Paharul poate fi spălat în mașina de spălat vase.
- În cazul în care baza de încărcare este murdară, ștergeți-o cu un material textil curat, ușor umezit, apoi cu unul uscat. Asigurați-vă că contactele ștecherului nu intră în contact cu apa sau umezeala.
- Puteți șterge carcasa de transport folosind un material textil uscat sau ușor umezit și apoi ștergeți-o cu grijă. Asigurați-vă că atunci când faceți acest lucru, nu pătrunde umezeală în slotul micro-USB de pe partea laterală a carcasei. Nu pulverizați carcasa de transport cu apă, nu o clătiți sub jet de apă și nu o introduceți în apă.
- Curățați cablul de alimentare și adaptorul doar cu un material textil uscat, nu spălați niciodată cu apă sau alte lichide.

ÎNLOCUIREA CAPETELOR PERIUȚEI DE DINȚI

- Înlocuiți în mod regulat capul periuței de dinți la fiecare 3 luni, sau mai devreme dacă prezintă semne de uzură. Utilizați doar capete de periuță de dinți originale.

DEPOZITARE

- Când nu utilizați periuța de dinți pentru o perioadă lungă de timp, deconectați baza de încărcare de la priza de alimentare și puneți periuța de dinți și capul periuței curățate în carcasă, într-un loc uscat și curat. Nu expuneți carcasa depozitată la temperaturi extreme, lumina directă a soarelui și umiditate excesivă și nu o depozitați într-un mediu cu mult praf.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Periuță de dinți

Baterie: Li-Ion/ 3.7 V / 650 mAh

Timp de funcționare când e încărcată complet: până la 100 de minute

Nivel de zgomot: 65 dB(A)

Nivelul clasei de protecție împotriva pătrunderii dăunătoare de apă: IPX7

Bază de încărcare

Intrare: 100-240 V ~, 50-60 Hz, 2.0 W

Clasa de protecție la șocuri electrice: II

Nivelul clasei de protecție împotriva pătrunderii dăunătoare de apă: IPX7

Carcasă de transport

Intrare: micro-USB, 5V, 40-500 mA

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este de 65 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică față de o putere acustică de referință de 1 pW.

Explicarea terminologiei tehnice

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

Clasa II – Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată prin izolație dublă sau rezistentă.

Nivelul clasei de protecție împotriva pătrunderii dăunătoare a apei:

IPX7 – Aparatul este protejat împotriva pătrunderii dăunătoare a apei atunci când este scufundat la o adâncime de 1 metru timp de 30 de minute.

Modificările textului și ale parametrilor tehnici snt rezervate.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

